

アンプル熔閉器

アンプル熔閉



機種名

日本医療機器株式会社 三方バーナー
A-10


蕪木製作所 テスラコイル
2011年度購入

特徴

アンプルを真空状態のまま熔封することができます。バーナーの炎が三方から中心で交わるように放射されるため、容易にガラスを熔融することができます。

また、テスラコイルを備えていますので、密封状態を確認することができます。

テスラコイルを当てると、大気圧の場合(左)変化ありませんが、真空の場合(右)青白く光ります。

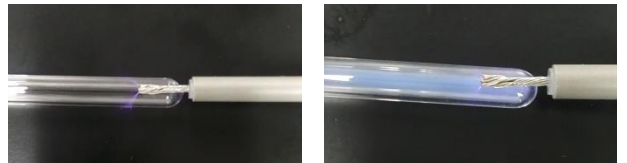

料金等

機器使用: 150 円 / 時

操作法説明: 3,900 円 / 時

研究員による支援

3,900 円 / 時

菌株の凍結乾燥保存

実施例
乳酸菌株の保存

ご利用申し込みは実施日の3日前までをお願いします。
ただし、打ち合わせ、機器の空き具合等によってご希望にお応えできない場合がありますので、事前にお問い合わせください。